

咬合採得用付加型シリコーン印象材


ヴォンフレックス S バイト

VERICOM
Making the World Smile

Vonflex S Bite

オールラウンドに対応できる 使いやすさを追求したバイト材

ヴォンフレックス S バイトはクラウン・ブリッジからデンチャーまで
幅広く対応可能な咬合採得用シリコーン印象材です

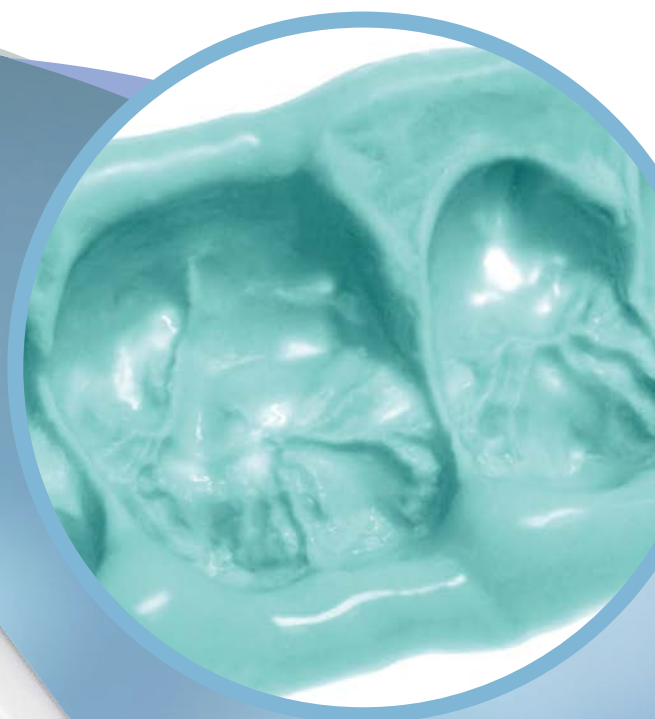

PENTRON JAPAN INC.

余裕のある操作時間と、口腔内のシャープな硬化

室温中では十分な操作時間（45 秒）があります。口腔内注入後はシャープに反応し、スピーディーに硬化が完了するため、精度の高い咬合記録を採得することができます。

正確な咬合位置を記録

ペーストの押し出し操作は、軽くスムーズなため、クイックに歯列への注入が可能です。硬化前のペーストは、咬合抵抗が少ないため、正確な咬合位置を記録できます。またチキソトロピー性に優れ、無圧状態では垂れにくく、加圧時にはスムーズに流れるので、さまざまな採得方法にも対応できます。



ショア A 硬さ：88±2

硬化物は適度な硬さがあり、ナイフや切削バー等でシャープなトリミングが可能です。



ナイフによるトリミング



切削バーによるトリミング

寸法精度を維持

付加型シリコンを採用し、硬化後長期間にわたり安定した寸法精度を維持します。
(24 時間後の線形寸法変化 0.029 mm)

ヴォンフレックス S バイト 包装内容



カートリッジ：50mL×2本



ミキシングチップ（グリーン）×6本

一般医療機器 歯科材料 6 歯科用印象材料 歯科咬合採得用材料 (70883000) 届出番号:13B2X00022000125号

関連製品

ミキシングチップ（グリーン）48本入



一般医療機器 機械器具 65 歯科用充填器
歯科用充填・修復材補助器具 (38782000)
届出番号:13B2X00022000011号

ディスペンサーガン (50mL カートリッジ用)



一般医療機器 機械器具 65 歯科用充填器
歯科用充填・修復材補助器具 (38782000)
届出番号:13B2X00022000013号

2022-07

PENTRON®
JAPAN INC. 
www.j-pentron.com

製造販売元

ペンترون ジャパン株式会社

〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17
TEL.03-5746-0316 FAX.03-5746-0320

ご使用の際は、製品添付文書を必ずご確認ください。